


牛脂の脂肪酸 (メチルエステル)

- ① ミリスチン酸 (3%)
- ② パルミチン酸 (29%)
- ③ パルミトレン酸 (2%)
- ④ ステアリン酸 (20%)
- ⑤ オレイン酸 (41%)
- ⑥ リノール酸 (1%)



Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 °C ~ 220 °C Program rate 3 °C/min
Split ratio : 60 : 1
Injection : 250 °C
Detector : FID (250 °C)
Carrier gas : He, 0.8 mL/min

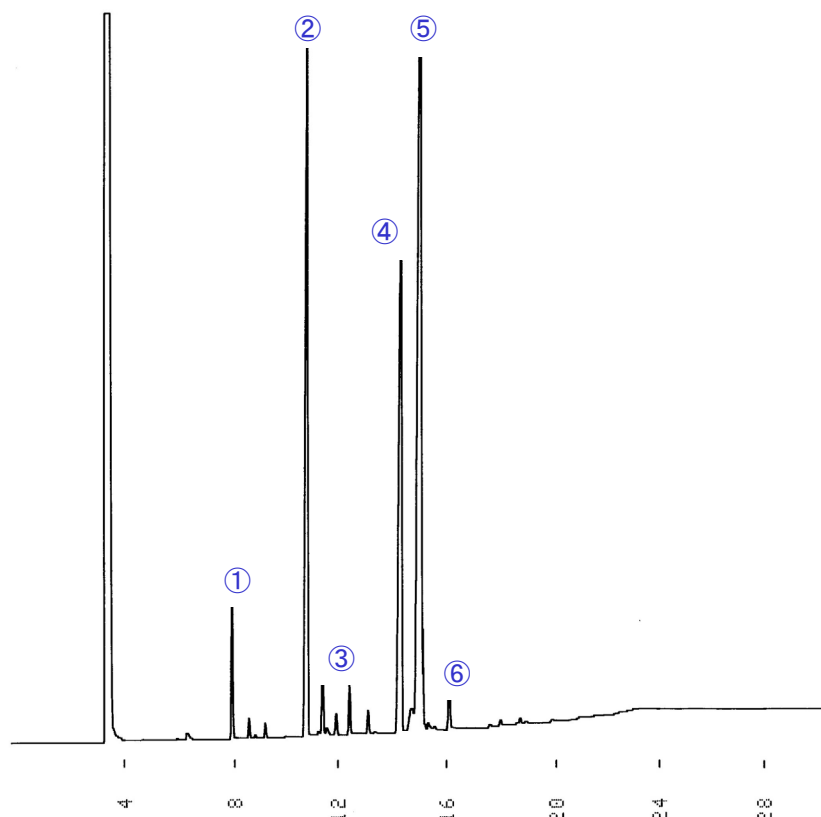