


## マーガリンの脂肪酸 (メチルエステル)

ラウリン酸 (3%)  
ミリスチン酸 (1%)  
パルミチン酸 (19%)  
ステアリン酸 (9%)  
エライジン酸 (1%)  
オレイン酸 (35%)  
リノール酸 (25%)  
リノレン酸 (4%)



Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.  
Column temp : 150 ~ 220 Program rate 3 /min  
Split ratio : 60 : 1  
Injection : 250  
Detector : FID (250 )  
Carrier gas : He, 0.8 mL/min

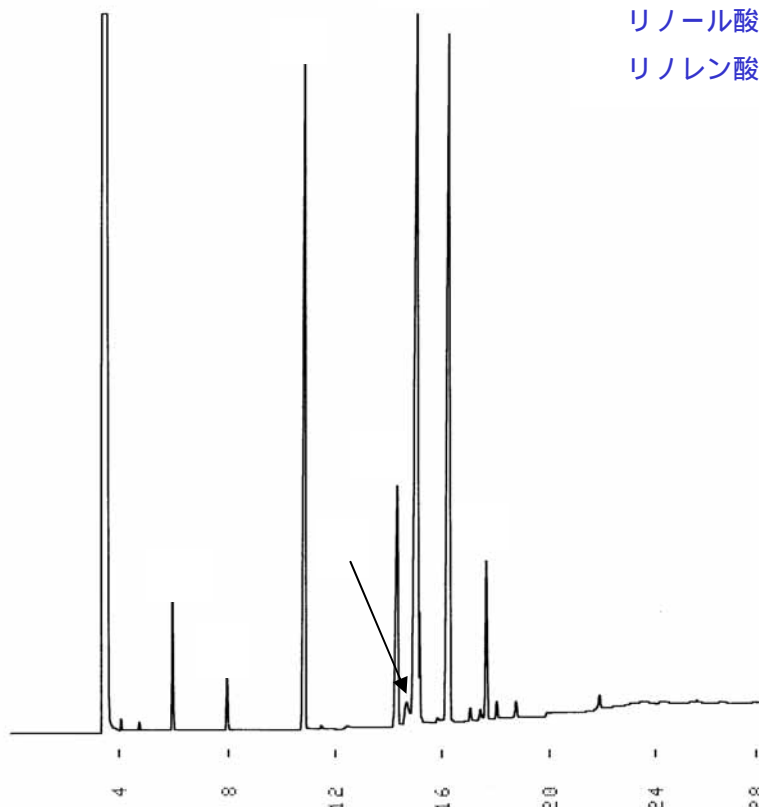