

柘の香り

柘 (ひいらぎ)

学名: *Osmanthus heterophyllus*

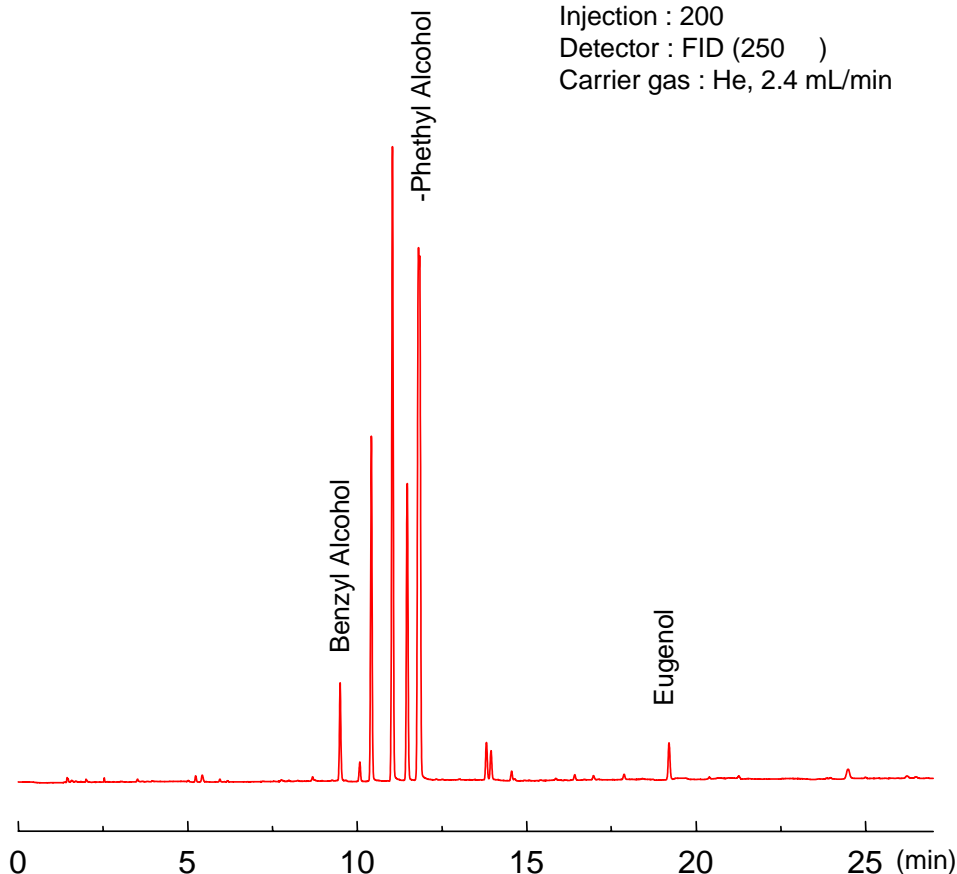
分類: モクセイ科モクセイ属

関東以西の山地に自生する常緑の小高木。庭木としてよく植栽されます。晩秋から初冬のころにヒイラギは、香りのよい白色の小さな花を咲かせます。節分の夜には、ヒイラギの枝に鰯(いわし)の頭を刺したものを家の門口に立てて、大豆を撒く風習があります。つやのある常緑の葉の縁には針状の鋭い鋸歯(きよし)があり、いかにも悪い鬼を追い払いそうです。



NeedlEx 有機溶剤用 (100 mL濃縮)

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D. 0.25 μ m
Column temp : 50 ~ 200 Program rate 5 /min
Split ratio : 10 : 1
Injection : 200
Detector : FID (250)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

NeedlEx 有機溶剤用
(100 mL濃縮)

信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2

TEL 075-621-2360

FAX 075-602-2660

e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

URL: <http://shinwa-cpc.co.jp/>