


ウスターソースの香気成分

NeedlEx 有機溶剤用 (100 mL濃縮)

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D. 0.25 μ m
Column temp : 50 ~ 200 Program rate 5 /min
Split ratio : 10 : 1
Injection : 200
Detector : FID (250)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

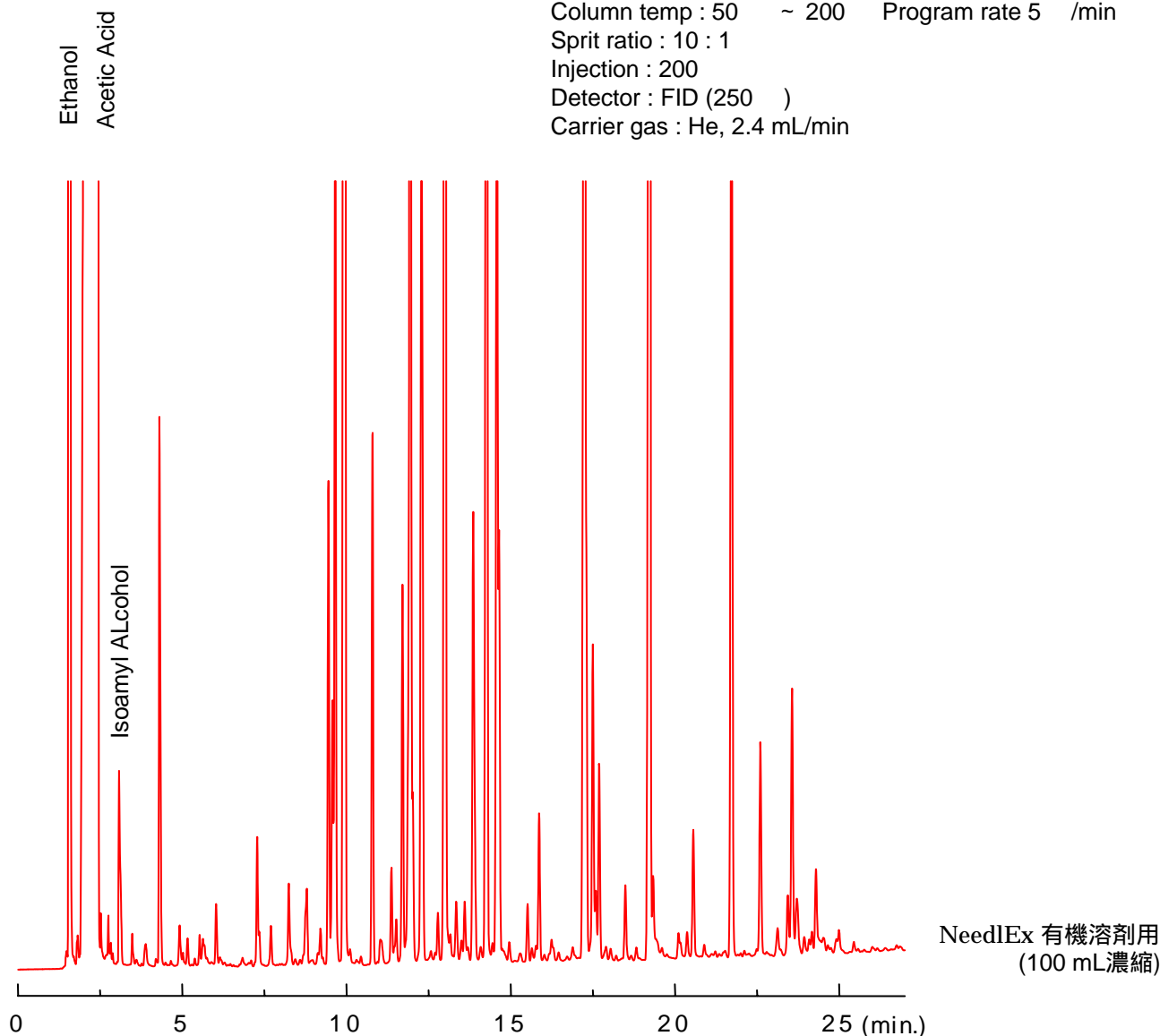

信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
T E L 075-621-2360
F A X 075-602-2660
e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
U R L : <http://shinwa-cpc.co.jp/>