

柚子の香り

柚子 (ユズ)

学名: Citrus junos

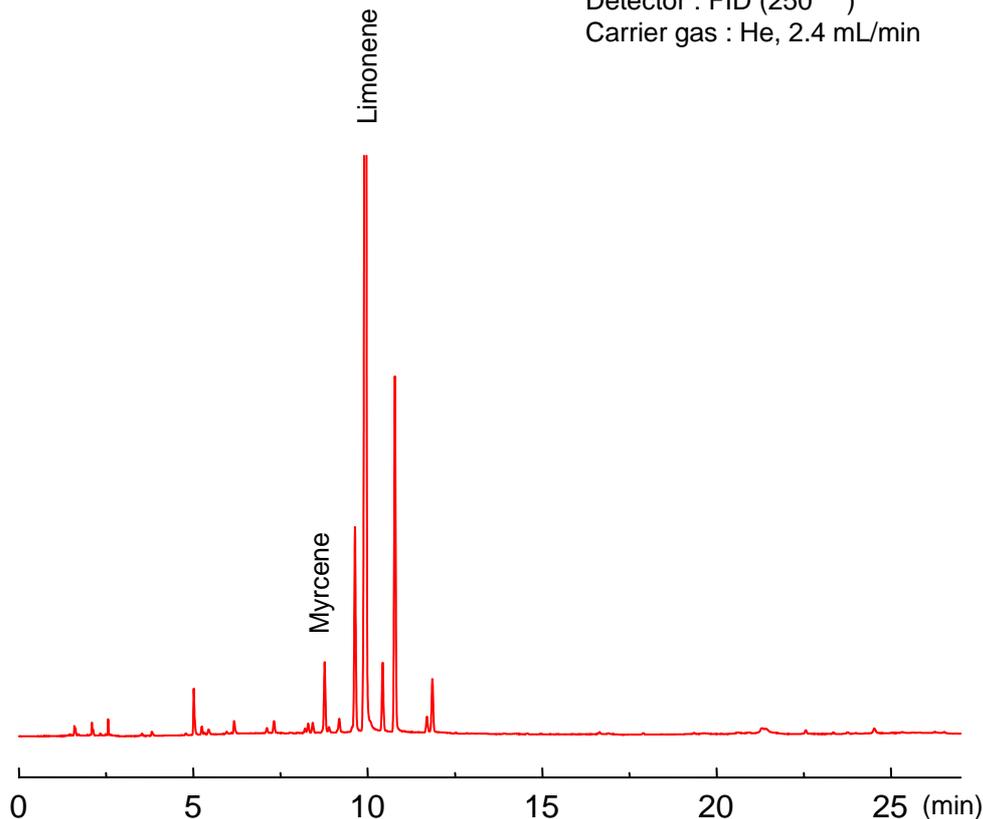
分類: ミカン科ミカン(キトルス)属

柚子は、日本原産のように思われますが、実は中国長江上流が起源です。日本には、奈良～飛鳥期に渡来されたといわれています。ミカンの仲間(柑橘類)には沢山種類があり、そのまま食べられる物と、香りや酸味を楽しむ香酸柑橘類に大別出来ませんが、ユズは香酸柑橘類の方です。



NeedlEx 有機溶剤用 (100 mL濃縮)

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D. 0.25 μ m
Column temp : 50 ~ 200 Program rate 5 /min
Split ratio : 10 : 1
Injection : 200
Detector : FID (250)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

NeedlEx 有機溶剤用
(100 mL濃縮)

信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2

TEL 075-621-2360

FAX 075-602-2660

e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

URL: http://shinwa-cpc.co.jp/